




MediVacPac i *Transportläge!*
OBS! Alltid Transportläge mellan avdelning och ambulans samt under ambulanstransport.



MediVacPac i *Överflyttningsläge!*
OBS! Överflyttningsläge endast vid överflyttning av patient.

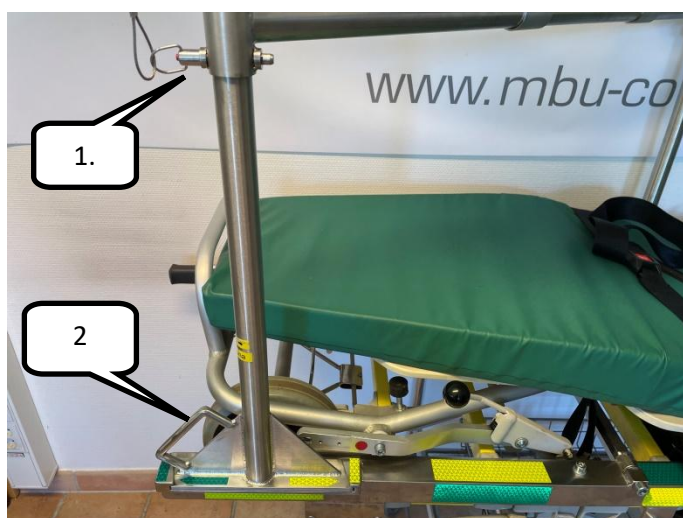

Placera dig vid fotändan mellan bärhandtagen.
1. Drag ut låssprint.
2. Greppa med höger hand stödbenets handtag.



3. Vrid medsols enligt bild. Lyft upp och för försiktigt över till andra sidan.



Dra ut vänster bärmarm fullt.
Placera stödbenet på tappen på
bärmarmen. Säkra att stödbenet är i
position.



MediVacPac i position *Överflyttningsläge*! Lyft över
patient försiktigt. När patient är säkrad och medicin
teknisk utrustning är kopplad och om det är möjligt,
vecka något i knäled och lyft lite i rygg för stabilare läge
av patient under transport. Lyft tillbaka stödbenet till
Transportläge.



Placera stödbenet i hållaren enligt bild.



Vrid motsols till det tar stopp. Tryck i låssprint.
Kontrollera att låssprint är säkrad enligt bild!



MediVacPac i *Transportläge!*

OBS! Använd alltid anpassad bårvagn för ergonomisk och säker överflyttning av patient, transport mellan avdelning och ambulans samt i- och urlastning ambulans.

För mer information se film på www.mbu-con.se

MMBU
CONSTRUCTIONS AB